

Snelle referentiegids


ThinPrep[®] Pap Test Instructies voor monsterverzameling

Protocol voor de Rovers[®] Cervex-Brush[®] Combi bij de ThinPrep Pap Test

- Zet alles klaar voordat u aan de procedure begint.
- Controleer de uiterste gebruiksdatum op het potje. Gebruik geen potjes waarvan de gebruiksdatum vervallen is.
- Controleer of de complete plastic verzegeling van het deksel van het potje verwijderd en weggegooid is.
- Vul de patiëntgegevens op zowel het aanvraagformulier als het potje volledig in. Als er gegevens ontbreken op het potje, bestaat de kans dat het monster wordt teruggestuurd.
- Verwijder het deksel van het potje voor het nemen van het uitstrijkje.
- Indien het speculum gelubriceerd moet worden, dient wat warm water gebruikt te worden. Indien nodig kan een kleine hoeveelheid wateroplosbaar glijmiddel worden aangebracht op het buitenste gedeelte van het speculum. Zorg daarbij dat u de punt vermijdt, aangezien dit het ThinPrep Pap Test proces kan beïnvloeden.



Noteer het ID van de patiënt op het potje zoals gevraagd door de lokale overheden. De patiëntinformatie en medische geschiedenis op het cytologie aanvraagformulier.

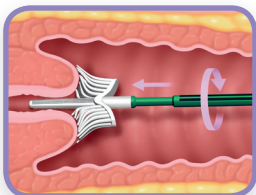

Neem voldoende materiaal uit de baarmoederhals met een Rovers Cervex-Brush Combi (bezemachtig instrumentje met een geïntegreerd endocervicaal afnameborsteltje). Desgewenst kan het speculum worden verwarmd en gelubriceerd met handwarm water. Indien nodig kan een kleine hoeveelheid wateroplosbaar glijmiddel worden aangebracht op het achterste speculumblad.¹² Plaats het endocervicale deel van het afnameborsteltje diep genoeg in het baarmoederhalskanaal zodat de andere borstelhaartjes volledig contact maken met de baarmoedermond. Druk zachtjes en draai de borstel 2 keer rond met de klok mee.



Spoel de Rovers Cervex-Brush Combi meteen uit in het potje met PreservCyt[®] oplossing door hem 10 keer op de bodem van het potje te drukken waardoor de borstelhaartjes uit elkaar komen te staan. Draai het borsteltje tenslotte **krachtig** rond zodat al het materiaal vrijkomt. Controleer de Rovers Cervex-Brush Combi visueel om er zeker van te zijn dat er geen resten zijn achtergebleven. Gooi het afnameborsteltje weg. **Laat de kop van de Rovers Cervex-Brush Combi niet achter in het potje.**



Draai het dopje er zodanig op dat de markering op het dopje over de markering op het dopje valt. **Het dopje niet te hard aandraaien.**



Plaats het potje en aanvraagformulier in een monsterzakje voor transport naar het laboratorium.

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als het potje is omgestoten?

Als het potje wordt omgestoten nadat het uitstrijkje is genomen, controleer dan of er nog vloeistof in het potje is achtergebleven. Als ongeveer een derde van de vloeistof nog in het potje zit, mag het potje nog voor verwerking naar het laboratorium worden gezonden. Maak een aantekening op het aanvraagformulier om laboratorium te informeren over het gemorste materiaal. Vul de inhoud van het potje niet aan met vloeistof uit een ander potje; in het laboratorium zal worden gezorgd dat de hoeveelheid eventueel wordt aangepast.

Kan ik een ThinPrep uitstrijkje nemen als de patiënt menstrueert?

Nee. Afname tijdens de menstruatieperiode dient te worden vermeden.

Kan ik de Rovers Cervex-Brush Combi gebruiken als er stenose is van het ostium?

De Rovers Cervex-Brush Combi heeft een geïntegreerd endocervicaal borsteltje dat in de meeste gevallen gebruikt kan worden. Wanneer sprake is van ernstige stenose, kan overwogen worden uitsluitend een endocervicaal borsteltje te gebruiken.

Kan ik de Rovers Cervex-Brush Combi gebruiken om uitstrijkjes uit de fornix te nemen?

Nee, voor het nemen van uitstrijkjes uit de fornix wordt de standaard Rovers Cervex-Brush aanbevolen. Met het instrument dienen vegende bewegingen te worden gemaakt.

Kan ik de Rovers Cervex-Brush Combi gebruiken als er veel ectropion aanwezig is?

Ja, de Rovers Cervex-Brush Combi kan gewoon worden gebruikt. Voor het specifieke gebied van ectropion moet daarnaast echter ook een ronddraaiende vegende beweging worden gemaakt met een standaard Rovers Cervex-Brush. Beide instrumenten dienen te worden uitgespoeld in hetzelfde potje.

Mag ik gebruikmaken van een glijmiddel?

Indien het speculum gelubriceerd moet worden, dient wat warm water gebruikt te worden. Indien nodig kan een kleine hoeveelheid wateroplosbaar glijmiddel worden aangebracht op het buitenste gedeelte van het speculum. Zorg daarbij dat u de punt vermijdt, aangezien dit het ThinPrep Pap Test proces kan beïnvloeden.

Moet ik een apart monster nemen voor HPV-tests?

Nee. HPV-tests kunnen worden uitgevoerd met hetzelfde materiaal dat is verkregen voor de ThinPrep Pap Test.

Wel doen

- Als er te veel slijm aanwezig is, dient dat voorzichtig weggehaald te worden voordat het monster genomen wordt.
- De Rovers Cervex-Brush Combi dient 2 maal met de klok mee rondgedraaid te worden.
- Plaats het endocervicale deel van het afnameborsteltje diep genoeg in het baarmoederhalskanaal zodat de andere borstelhaartjes volledig contact maken met de baarmoedermond
- Steek de Rovers Cervex-Brush Combi meteen in het potje door hem 10 keer op de bodem van het potje te drukken, waardoor de borstelhaartjes uit elkaar komen te staan. Draai het borsteltje tenslotte krachtig rond zodat al het materiaal vrijkomt. Controleer de Rovers Cervex-Brush Combi visueel om er zeker van te zijn dat er geen resten zijn achtergebleven. Gooi het afnameborsteltje weg.
- Plaats het deksel op het potje en draai het zodanig vast dat de zwarte markeringsstreep op het deksel voorbij de zwarte markeringsstreep op het potje gaat om morsen te voorkomen
- Plak niets op het ongelabelde gedeelte van het potje zodat de inhoud zichtbaar blijft
- Monsters dienen onverwijld naar het lab gezonden te worden

Niet doen

- Maak de baarmoederhals niet stelselmatig schoon en maak geen uitstrijkje van de baarmoederhals voordat u een monster neemt.
- Gebruik geen niet-wateroplosbare glijmiddelen die carbomeren bevatten
- Laat het afname-instrument niet in het potje staan terwijl u met de patiënt bezig bent
- Draai het deksel niet te strak op het potje
- Laat de kop van de Rovers Cervex-Brush Combi niet achter in het potje
- Plak nooit meer dan één label op het potje
- Plak de labels met streepjescodes niet verticaal op het potje, maar horizontaal
- Plak geen labels over het deksel van het potje
- Gebruik geen potjes waarvan de gebruiksdatum vervallen is
- De potjes dienen onverwijld naar het laboratorium gestuurd te worden
- Niet gebruiken tijdens zwangerschap

1. Cervicovaginal Cytology Based on the Papanicolaou Technique; Approved Guideline – Third Edition (Clinical and Laboratory Standards Institute GP15-A3).
2. Hologic interne studie, data in archief.
3. Rovers Cervex-Brush Combi, Information For Use, 2010-11.

Diagnostic Solutions | Hologic.com | euinfo@hologic.com

SS-05867-EUR-NL Rev 002 © 2016 Hologic, Inc. Alle rechten voorbehouden. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hologic, Science of Sure, PreservCyt, ThinPrep en geassocieerde logo's zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Hologic, Inc. en/of zijn dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en productnamen zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze informatie is bedoeld voor medische professionals en is niet bedoeld als een productadvertentie of promotie waar dergelijke activiteiten verboden zijn. Aangezien Hologic-informatie wordt verspreid via websites, eBroadcasts en beurzen, is het niet altijd mogelijk om te controleren waar dergelijke informatie verschijnt. Voor specifieke informatie over welke producten beschikbaar zijn voor verkoop in een bepaald land, kunt u contact opnemen met uw Hologic-vertegenwoordiger of een e-mail sturen naar euinfo@hologic.com

Dit is een algemeen informatie-instrument voor medische professionals en is geen complete voorstelling van de Instructies voor gebruik (IFU) of Bijsluiter van het/de product(en) en het is de verantwoordelijkheid van de medische professionals om de IFU of bijsluiter te lezen en op te volgen. De voorziene informatie kan mogelijk een specifieke techniek of protocol suggereren, maar het is de verantwoordelijkheid van de medische professional om te bepalen welke techniek of protocol geschikt is. Clinici blijven steeds verantwoordelijk voor de toepassing van solide praktijken voor de evaluatie en selectie van patiënten, en voor naleving van de toepasselijke plaatselijke, regionale en nationale voorschriften en normen met betrekking tot accreditatie, anesthesie, terugbetaling en alle andere aspecten van de spreekkamerprocedures. Hologic kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die volgt uit uw gebruik van de aangeboden informatie.